

# Alarmknop



## Belangrijk!

Controleer of uw telefoonprovider oproepnummer doorgave ondersteunt en of deze actief is, dit is belangrijk want dan kunnen de ontvangers van de alarmen onmiddellijk zien van wie de oproep komt.

Indien deze service niet actief is neem dan contact met uw telefoonprovider.


Plaats de basisunit ergens centraal in huis, liefst in de kamer waar de gebruiker(s) het meest van zijn tijd doorbrengt. Controleer vanop dit punt het bereik van de draadloze paniekknop.

## Kenmerken

- GSM 850/900/1800/1900 band, kan overal ter wereld gebruikt worden.
- Belt naar 5 voorgedefinieerde nummers wanneer alarm geactiveerd wordt, druk "DISARM" op het hoofdtoestel om het bellen te stoppen.
- Bel en/of stuur SMS naar 5 voorgedefinieerde nummers.
- Ingebouwde oplaadbare batterij voor geval van stroomonderbreking

## Installeren van basisstation

Open de behuizing van de hoofdunit en plaats de SIM kaart zoals onderstaande afbeelding.

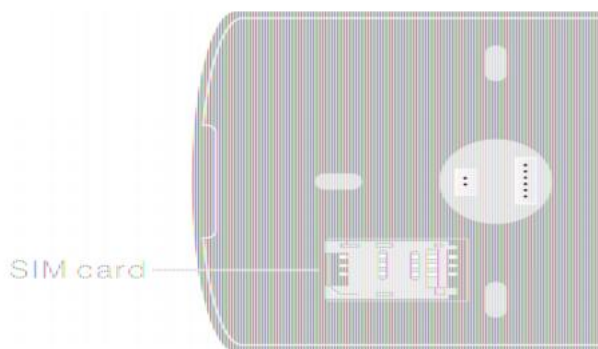

- Steek de connector van de stroomvoorziening in de connector van de module en sluit aan op het stopcontact.
- Zet de module op 'ON' (Simkaarhouder links boven, onderaan de module ziet u een kleine switch, on/of, zet deze met een puntig voorwerp in de on stand.

Zorg ervoor dat de pincode van de SIM uit staat.

Zorg ervoor dat de SIM actief is.

Bij een herlaadkaart: zorg ervoor dat er beltegoed op de SIM beschikbaar is. Prepaid kaarten dien je éénmaal mee uit te bellen alvorens deze actief staan.

### Programmeren van de panieknoppen

- Duw met een puntig voorwerp in de reset knop op de rechterzijkant van de hoofdunit, u hoort een korte biep en de status led brand nu permanent rood om aan te geven dat u nu uw panieknoppen kunt programmeren.
- Druk nu één voor één op de panieknoppen, u zult een biep horen en de status led brandt groen.
- Druk nu nogmaals met een puntig voorwerp in de reset knop.

Panieknoppen zijn nu succesvol gekoppeld.

### Te alarmeren nummers programmeren

Men kan de alarm oproepnummers (maximaal 5) instellen door met een GSM of vast telefoontoestel in te bellen op het oproepnummer in het hoofdtoestel.

Programmeren van de nummers :

Bel het oproepnummer van het toestel, na de biep geeft u het paswoord 888888 in gevolgd door # . Een lange biep geeft aan dat het paswoord correct is. Hierna kunt u onderstaande commando's doorgeven :

Actie	Code	
Paswoord voor luisteren op afstand wijzigen	30#(nieuw paswoord)#	Paswoord moet 6 cijfers bevatten Standaard: 123456

Paswoord voor programmatie wijzigen	31#(nieuw paswoord)#	Paswoord moet 6 cijfers bevatten Standaard: 888888
Oproepnummers voor alarm programmeren (BELLEN)	(50-54)#oproepnummer#	50: het eerste nummer, 51: het tweede oproepnummer, ... Nummers mogen niet meer dan 20 cijfers bevatten
Verwijderen van een oproepnummer	(50-54)##	
Oproepnummers voor alarmen programmeren (SMS)	(55-59)#oproepnummer#	55: eerste sms nummer, 56: tweede sms nummer, ... Nummers mogen niet meer dan 20 cijfers bevatten
Verwijderen van een sms oproepnummer	(55-59)##	

De SMS oproepnummers zijn facultatief en dienen niet opgegeven te worden. Het is wel nuttig deze in te stellen omdat een SOS telefoon kan afgebroken worden door op een antwoordapparaat te stuiten, de SOS SMS'en zullen immers altijd verstuurd worden naar de opgegeven nummers.

### Belangrijk!

Indien de programmatie per telefoon niet lukt dien je te programmeren via SMS:

Je stuurt dan de volgende commando's 1 voor 1 als een SMS naar de SIM kaart in de module. Elke SMS dient bevestigd te worden door een bevestiging SMS uit de module.

888888#50#nummer dat gebeld dient te worden#  
 888888#55#1e nummer dat een SMS dient te ontvangen#  
 888888#56#2e nummer dat een SMS dient te ontvangen#  
 en zo kan je ook nog 57, 58 en 59 toevoegen.

## Betekenis verschillende led lampjes

LED	LED Status	System working status
POWER	Uit	Stroomtoevoer niet correct, interne batterij leeg
	Rood	Stroomtoevoer ok
STATUS	Rood knippert snel	Controle SIM en netwerk zoeken
	Rood knippert traag	Sim kaart en GSM ontvangst ok
	Rood vast	Codeer status, in wacht om knoppen te programmeren
	Groen knippert snel	Knop(pen) succesvol geprogrammeerd
	Rood en groen knipperen afwisselend	Correcte SMS instellingen ontvangen
MONITOR	Aan	Inluister status actief
ALARM	Aan	Alarmstatus actief

## Toestel resetten

Druk de reset knop gedurende 5 seconden in, tot dat de led op het voorpaneel snel knippert.

Het toestel staat nu terug in fabrieksinstellingen

## Alarm slaan

- Bij het indrukken van de alarmknop, hetzij op het toestel, hetzij op de draadloze paniekknop zal de led op het frontpaneel oplichten.
- De voorgeprogrammeerde alarmnummers worden opgebeld en de SOS SMS'en worden verstuurd.
- De SMS die verstuurd wordt heeft de volgende tekst 'EMERGENCY ALARM'.
- Bij het opnemen door één van de gebelde nummers (let op voor antwoordapparaat) stopt het bellen.
- Indien één van de gebelde nummers opneemt kan hij in luisteren wat er gebeurt in de buurt van het basisstation.

## Inluisteren vanop afstand

Personen die u het paswoord gegeven hebt om te kunnen in luisteren kunnen het volgende doen.

Opbellen van de module, na de biep geven zijn de code in (standaard 123456 tenzij u deze gewijzigd heeft) gevolgd door #.

Zij kunnen nu horen wat er zich afspeelt in de nabijheid van het basisstation. 3 korte biep betekend verkeerde code

1 lange biep betekend dat de code juist is en dat er in geluisterd kan worden.

Bij uitvallen van de elektriciteit zal de eerste in de lijst van de alarmnummers een SMS ontvangen met de boodschap 'POWER DOWN', bij terug inschakelen van de elektriciteit krijgt hij de melding 'POWER UP'.

### Tips

- De personen die de alarmen ontvangen programmeren best “alarm XXX” in de contacten van hun GSM waarbij XXX bijvoorbeeld staat voor oma.
- Controleer maandelijks de werking van het systeem en de SIM kaart.
- Laat de personen naar wie u de alarmen laat bellen ook deze handleiding lezen.
- Stuur de alarmen door naar personen die u onmiddellijk kunnen helpen en toegang hebben tot uw woning!

TN-Invest BV

Esdoornstraat 52

8300 Knokke-Heist

0479/69.69.48

[info@seniorenalarmen.be](mailto:info@seniorenalarmen.be)

[info@seniorenalarmen.nl](mailto:info@seniorenalarmen.nl)