


Alarm met 2-wegs communicatie

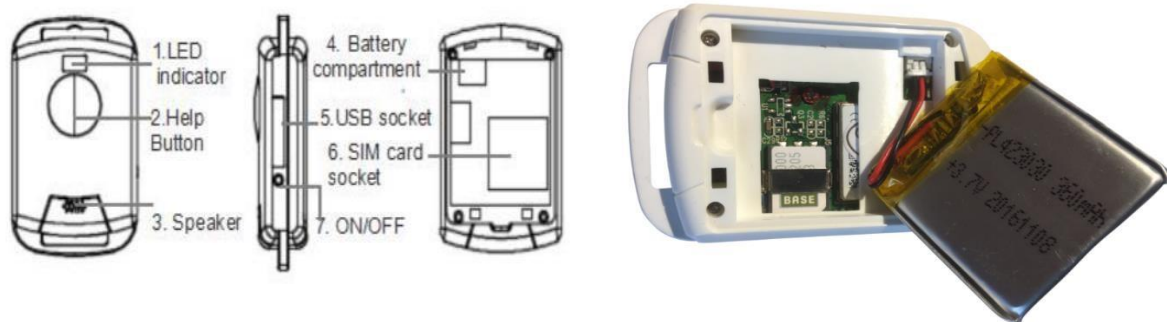

Belangrijk!

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen, eerst gedurende 3 uur opladen via de meegeleverde kabel. Het toestel 100% opgeladen als de groene led permanent oplicht.

SIM-kaart plaatsen (nano)

Zorg ervoor dat de pincode van de SIM is uitgeschakeld

Zorg ervoor dat de SIM actief is

Bij een herlaadkaart: zorg dat er beltegoed op de SIM beschikbaar is. Prepaid kaarten dien je éénmaal mee uit te bellen alvorens deze actief staan (niet enkel laten overgaan!).

- Open het klepje aan de achterkant
- Breng de SIM in (het hoekje 'af' van de simkaart moet er eerst inschuiven)
- Breng de lithium batterij in
- Sluit het toestel voorzichtig

Belangrijk!

Sluit het toestel voorzichtig d.w.z.: eerst de afgeronde kant inbrengen en dat het dekseltje lichtjes buigen en de andere kant er mooi insteken. Niet gewoon het dekseltje erin drukken.

Wij raden aan de achterkant toe te maken met een doorzichtige of witte tape. Op deze manier zit de achterkant mooi dicht en blijft deze stofvrij. Omwille van de luidspreker en de microfoon is het toestel nooit waterdicht.

Programmeren van de te alarmeren nummers

- Druk op de aan/uit knop gedurende een 5-tal seconden, de LED zal rood oplichten en snel knipperen
- Het alarm verbindt nu met het GSM netwerk, dit kan een 30-tal seconden duren
- Wanneer het rode lichtje langzaam knippert, 1 keer om de 3 seconden, is het alarm verbonden met het GSM netwerk en klaar voor programmatie.

Voor elke bijkomende programmatie of wijziging dient u de module terug in programmatie modus te zetten. Dit doet u door 5 seconden met een puntig voorwerp op de aan/uit knop te drukken.

Indien u nummers wilt veranderen kan u het alarm niet resetten maar u kan wel nummers 'overschrijven'. Dit doet u door gewoon terug bij *1 te beginnen.

Er kunnen 3 nummers geprogrammeerd worden.

De installatie van de nummers doe je met een andere gsm. Stuur met deze gsm de berichten naar het telefoonnummer van de SIM in het alarmtoestel.

Instellen van het eerste alarmnummer: stuur onderstaande SMS zonder spaties:

*1XXXXXXXXXX

Instellen van het tweede alarmnummer: stuur onderstaande SMS zonder spaties:

*2XXXXXXXXXX

Instellen van het derde alarmnummer: stuur onderstaande SMS zonder spaties:

*3XXXXXXXXXX

Waarbij XXXXXXXXXXXX het telefoonnummer van de te alarmeren persoon is.

De groene LED zal 3x kort oplichten na ontvangst van elk nummer.

Belangrijk is dat u terug uit programmatiemodus gaat na elke wijziging. Dus ook bij het instellen van alarm voor batterij en volume. Dit doet u door 1 keer kort op de aan/uit knop te duwen.

Alarm voor batterij laag

Om het lage batterij alarm te activeren stuurt u onderstaande SMS naar het alarm:

*SETBC

Om het lage batterij alarm te deactiveren stuurt u onderstaande SMS naar het alarm: *SETBO

De groene LED licht 3x op om de programmatie te bevestigen.

Volume van het alarm

Het volume van het alarm kan worden ingesteld, je stuurt daarvoor volgende commando's:

*SETLE1	50% LAAG
*SETLE2	80% MEDIUM
*SETLE3	100% HOOG

Testen van het GSM signaal

Druk de aan/uit knop 2x na elkaar snel in, de LED zal oplichten en het alarm zoekt netwerk.

Groene LED licht op	Signaal goed
Gele LED licht op	Zwakke GSM ontvangst

Indien er binnen de 2 minuten geen GSM-signaal gevonden wordt, zal de gele LED gedurende 10 seconden oplichten. Controleer in dit geval de ontvangst van de SIM kaart in een ander toestel of contacteer uw provider.

Opmerking:

Het testen van het GSM-signaal verbruikt veel spanning, doe het dus enkel indien nodig en laadt nadien bij.

Gebruik van de paniekknop

Druk de gele knop aan de voorkant van het toestel in, de rode LED licht nu knipperend op en het alarm zal het eerste van de 3 voorgeprogrammeerde nummers bellen, indien geen correct antwoord zal het nummer twee bellen. Indien hier geen correct antwoord, belt hij nummer 3.

Deze cyclus wordt 3 keer herhaald.

Verbinding duurt ongeveer 30 seconden, oplichten van de rode LED geeft aan dat het alarm wel degelijk verstuurd wordt.

Tevens zal automatisch de 2-wegs communicatie opgezet worden. Beide personen kunnen met elkaar praten dankzij de ingebouwde microfoon en luidspreker.

Ontvangst van alarm

De personen die het alarm ontvangen op hun telefoon moeten het gesprek aannemen en binnen de 10 seconden op een willekeurige toets van hun telefoon drukken.

Nemen ze op maar drukken ze niet op een willekeurige cijfertoets binnen de 10 seconden, dan zal het alarm de volgende nummers opbellen.

Het alarm maakt een onderscheid tussen een mailbox en een fysieke persoon aan de lijn doordat je als fysieke persoon na het opnemen ook nog op een willekeurige cijfertoets van je telefoon duwt.

Na het afleggen van het gesprek, zal het alarm terug naar stand-by modus keren en is het weer klaar voor gebruik.

Status van de leds

Rode LED is aan	Batterij laag
Rode LED licht op (3HZ)	GSM verbindt met netwerk
Rode LED licht op (1HZ)	Alarm is in programmatie mode
Groene LED licht 3x op	Huidige programmatie bevestigd
Groene LED licht op iedere 3 sec	GSM netwerk is OK
Gele LED licht op iedere 3 sec	GSM netwerk is zwak
Groene LED licht op aan oplader	Alarm laadt op
Groene LED aan lader	Batterij opgeladen

TN-Invest BV

Nijverheidsstraat 13

2260 Westerlo

Seniorenalarmen.be

Seniorenalarmen.nl

+32 14 57 46 27

contact@seniorenalarmen.be